

# Kit De Salud Oral

Para Limpiar & Proteger Tu Sonrisa

Gingivitis

## Cepillo dental giratorio profesional Rotadent ProCare®

- Se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como cepillarse y usar el hilo dental juntos
- Elimina el 92 % de la placa en el primer minuto de cepillado
- Proporciona resultados consistentemente superiores en la eliminación de manchas in-vitro tanto en superficies planas como interproximales
- 1 año de garantía

La caja incluye lo siguiente: Mango del cepillo, cabezal con cepillo de cerdas cóncavas, cabezal con cepillo de cerdas cortas y cargador

[Más detalles en [www.denmat.com](http://www.denmat.com)]



## Enjuague Pro-DenRx® Con Fluoruro Stannous

- Ayuda en la prevención de la caries dental
- Para usar en la prevención del deterioro de los dientes, la inhibición de placa dental y la reducción de la sensibilidad del diente

[Más detalles en [denmat.com](http://denmat.com)]



**LLAME AL: 1-855-876-4531**  
**brident.com**



FLY-GIN-SPA-BD

**brident.**  
DENTAL & ORTHODONTICS

# Instrucciones Del Kit De Salud Oral



Rotadent ProCare® requiere una técnica de cepillado diente por diente. La rotación de 360 grados puede hacer que el cabezal del cepillo se resbale de los dientes durante su uso, especialmente cuando se está acostumbrando a usar esta técnica por primera vez. Para ayudar a corregir esto, tome el mango con firmeza para estabilizarlo. Luego, siga los bordes de las encías para garantizar la limpieza adecuada de todas las superficies, como se describe a continuación:

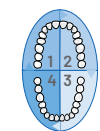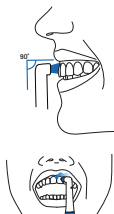


- **Técnica de cepillado:** Sostenga su Rotadent ProCare® de modo que la punta del cepillo entre en contacto con el borde de las encías y la superficie del diente en un ángulo de 90 grados. Para limpiar a fondo cada diente, realice movimientos en forma de "M" en los dientes superiores para masajear el borde de las encías, y movimientos en forma de "W" en los dientes inferiores.
- **Temporizador incorporado:** Para asegurarse de que se está cepillando de manera uniforme, divida la boca en cuatro secciones (o cuadrantes). Cepille cada cuadrante minuciosamente durante 30 segundos, según indique el QuadTimer.
- **Nota:** Algunas personas pueden experimentar una leve sensación de hormigueo cuando utilizan el Rotadent ProCare® por primera vez. Esto debe desaparecer después de unos días de uso.

[Referencia: Manual del usuario de Rotadent ProCare®]

## Enjuague Pro-DenRx® Con Fluoruro Stannous

### Adultos y niños de 6 años de edad o mayores:

- Usar según las indicaciones de un dentista profesional
- Usar una vez al día después de cepillarse los dientes con pasta dental o según las indicaciones de un dentista
- Quitar la tapa y el sello y reemplazar con la bomba
- Rota la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj para extender
- Presiona la bomba hasta que la medicina empiece a salir de la punta de la bomba
- Pon 1/8 oz. del enjuague Pro-DenRx concentrado (aproximadamente 2 presiones de la bomba) en el frasco incluido en la caja

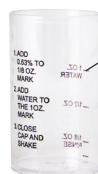

Agrega agua hasta la línea de 1 oz. en el frasco



- Agrega agua hasta la línea de 1 oz. en el frasco
- Cierra bien la tapa y agítalo bien
- Mueve vigorosamente la mitad de la mezcla entre tus dientes durante un minuto y después escúpela
- Repite el procedimiento con la mezcla restante
- Limpia el frasco con agua después de usarlo
- No te tragues el enjuague
- No comas ni bebas nada por 30 minutos después de enjuagarte

### Niños de 6 a 12 años de edad:

- Enséñale a tus hijos como enjuagarse bien (para reducir al mínimo la cantidad que se tragan)
- Supervisa a los niños cuanto sea necesario hasta que lo puedan usar sin supervisión

[Referencia: Manual de uso DenMat]

**Niños menores de 6 años de edad:** Consultar al dentista o al doctor

Instrucciones entregadas para la comodidad del paciente. Para más detalles favor consultar las instrucciones del fabricante incluidas en cada envase. Soumava Sen DDS, P.C. y Brident Dental Associates, P.C. son propiedad y están operados de forma independiente por los dentistas matriculados, Soumava Sen, DDS, Yein Kim, DMD y Sylvia Lin, DDS, quienes hacen negocios en nombre de Brident. Los consultorios de Brident reciben servicios de apoyo administrativo y empresarial de Brident Dental Services, LLC ("BDS"). BDS no es propietario de los consultorios dentales ni los opera, como tampoco emplea ni supervisa de ninguna manera a los dentistas que brindan atención dental. FLY-GIN-SPA-80

