

Kit Para Cuidado De Frenos

Para Limpiar y Proteger Tu Sonrisa

Cepillo dental giratorio profesional Rotadent ProCare®

- Se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como cepillarse y usar el hilo dental juntos
- Elimina el 92 % de la placa en el primer minuto de cepillado
- Proporciona resultados consistentemente superiores en la eliminación de manchas in-vitro tanto en superficies planas como interproximales
- 1 año de garantía

La caja incluye lo siguiente: Mango del cepillo, cabezal con cepillo de cerdas cóncavas, cabezal con cepillo de cerdas cortas y cargador

[Más detalles en www.denmat.com]



Mi Paste Plus™ Para La Sensibilidad y Protección Del Esmalte

Crema dental tópica (no es pasta) que se puede utilizar diariamente para:

- Aliviar la sensibilidad al proteger las terminaciones nerviosas formando una capa contra la placa
- Ayuda a volver a depositar minerales perdidos para fortalecer tus dientes

[Más detalles en mi-paste.com]



LLAME AL: 1-855-876-4531
brident.com

FLY-ORTH-CARE-SPA-BD



brident.
DENTAL & ORTHODONTICS

Instrucciones Del Kit Para El Cuidado De Los Frenos



Rotadent ProCare® requiere una técnica de cepillado diente por diente. La rotación de 360 grados puede hacer que el cabezal del cepillo se resbale de los dientes durante su uso, especialmente cuando se está acostumbrando a usar esta técnica por primera vez. Para ayudar a corregir esto, tome el mango con firmeza para estabilizarlo.

Luego, siga los bordes de las encías para garantizar la limpieza adecuada de todas las superficies, como se describe a continuación:

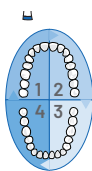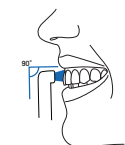


- **Técnica de cepillado:** Sostenga su Rotadent ProCare® de modo que la punta del cepillo entre en contacto con la línea de las encías y la superficie del diente en un ángulo de 90 grados. Para limpiar a fondo cada diente, utilice el cabezal del cepillo de punta larga y realice movimientos en forma de "M" en los dientes superiores para masajear el borde de las encías, y movimientos en forma de "W" en los dientes inferiores.
- **Temporizador incorporado:** Para asegurarse de que se está cepillando de manera uniforme, divida la boca en cuatro secciones (o cuadrantes). Cepille cada cuadrante minuciosamente durante 30 segundos, según indique el QuadTimer.
- **Nota:** Algunas personas pueden experimentar una leve sensación de hormigueo cuando utilizan el Rotadent ProCare® por primera vez. Esto debe desaparecer después de unos días de uso.

[Referencia: Manual del usuario de Rotadent ProCare®]

Mi Paste Plus™



- Cepillate con una pasta con fluoruro en la mañana y en la noche
- Aplica Mi Paste Plus™ (una cantidad igual al tamaño de un guisante) a la superficie de tus dientes utilizando un palito de algodón o un dedo protegido por un guante
- Déjalo así por 3 minutos
- Escupe pero no te enjuagues; deja que la pasta restante se disuelva lentamente

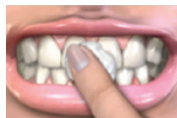

[Más detalles en mi-paste.com]

Instrucciones entregadas para la comodidad del paciente. Para más detalles favor consultar las instrucciones del fabricante incluidas en cada envase. Soumava Sen DDS, P.C. y Brident Dental Associates, P.C. son propiedad y están operados de forma independiente por los dentistas matriculados, Soumava Sen, DDS, Yein Kim, DMD y Sylvia Lin, DDS, quienes hacen negocios en nombre de Brident. Los consultorios de Brident reciben servicios de apoyo administrativo y empresarial de Brident Dental Services, LLC ("BDS"). BDS no es propietario de los consultorios dentales ni los opera, como tampoco emplea ni supervisa de ninguna manera a los dentistas que brindan atención dental.