

Kit De Atención Médica Bucal Para Niños

Protección y Limpieza

PROPHY

PHILIPS

Sonicare para niños

- Cepillo eléctrico con exclusivo diseño de cabezal que rodea el diente y los frenos para mejorar la remoción de placa
- Instrumento recomendado por profesionales para el cuidado en el hogar de enfermedades bucales
- La tecnología inalámbrica Bluetooth conecta a una aplicación gratuita y ayuda a los niños a aumentar lentamente el tiempo de cepillado al ciclo de cepillado de dientes de dos minutos recomendado por la ADA

[Más información en www.usa.philips.com]



KIDS KARE dentífrico con un 0.24% de fluoruro de sodio



Desde el empaque hasta el sabor, la marca Kids Kare fue diseñada pensando en los niños. Los productos bucales Kids Kare están disponibles con un delicioso sabor a bayas y un empaque amigable, lo que hace que cepillarse los dientes sea divertido y tenga un rico gusto para los pacientes jóvenes.

Beneficios destacados:


- La fórmula para pasta de dientes con fluoruro de sodio ofrece fluoruro de sodio al 0.24 % para ayudar de modo seguro a la prevención y el control de las caries dentales
- Muchos productos para la atención bucal de niños realmente no contienen fluoruro; por lo tanto, al administrarlo a sus pacientes pequeños, usted puede asegurarse de estar usando la pasta de dientes adecuada

[Más información en denmat.com]

Instrucciones Para El Kit De Atención Médica Bucal Para Niños

PHILIPS
sonicare

Como se describe a continuación, el Philips Sonicare para niños requiere una técnica de cepillado diente por diente en vez del frotado convencional.

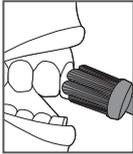

- **Técnica de Cepillado:** Después de aplicar la pasta dental, sostenga el cepillo en un ángulo de 45 grados en relación a dientes y encías, y luego enciéndalo. Deje que el cepillo limpie cada diente presionando suave y delicadamente por unos segundos. Luego pase al siguiente diente y repita el proceso
- **Conectarse a la aplicación:** El cepillo de dientes se conecta con la aplicación y ayuda a los niños a aumentar lentamente el tiempo de cepillado a los dos minutos recomendados por el dentista. Cuando usa la aplicación, los niños logran imitar al instructor de cepillado de la aplicación cuando cepilla con cuidado cada sección de su boca. El instructor de cepillado alentará a los niños a aumentar el tiempo que pasan en cada cuadrante

[Referencia: Manual del propietario de Philips Sonicare para niños]

KIDS KARE dentífrico con un 0.24% de fluoruro de sodio



Adultos y niños mayores de 6 años de edad: Cepillarse según las direcciones del dentista o el médico

Niños de 6 años o menores: Utilizar una cantidad igual al tamaño de un guisante para supervisar el cepillado y minimizar que se lo traguen hasta que sean capaces de utilizarlo sin supervisión

En caso de consumir fluoruro de otras fuentes, o para niños menores de 2 años de edad consultar al dentista o al doctor

[Referencia: Manual del propietario de Kids Kare]

Las instrucciones han sido proveídas para la conveniencia del paciente. Por favor referirse a las guías incluidas por los fabricantes en los paquetes de cada producto para más detalles.

FLY-PEDD-PRO-SPA-BD

brident
DENTAL & ORTHODONTICS