

Kit Para El Cuidado De Enfermedades De Los Dientes y Encías

Limpia y Protege Tu Sonrisa

SRP

Cepillo dental giratorio profesional Rotadent ProCare®

- Se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como cepillarse y usar el hilo dental juntos
- Elimina el 92 % de la placa en el primer minuto de cepillado
- Proporciona resultados consistentemente superiores en la eliminación de manchas in-vitro tanto en superficies planas como interproximales
- 1 año de garantía

La caja incluye lo siguiente: Mango del cepillo, cabezal con cepillo de cerdas cóncavas, cabezal con cepillo de cerdas cortas y cargador

[Más detalles en www.denmat.com]



Pro-DenRx® Chlorhexidine



- Ingredientes activos en los enjuagues bucales para reducir la placa dental y bacteria oral
- Para usar como enjuague antimicrobiano entre visitas al dentista para el tratamiento de la gingivitis (inflamación de las encías)
- Ideal para pacientes que están sometidos a un tratamiento activo periodontal

[Más detalles en denmat.com]

Pro-DenRx® Gel Neutral 1.1% Con Fluoruro De Sodio



- Gel de fluoruro para uso en el hogar
- Tan potente como un medicamento recetado – Gel tópico para prevenir la caries y controlar el desarrollo de la placa
- Seguro para el uso en cualquier paciente, incluyendo los que tienen restauraciones

[Más detalles en denmat.com]

LLAME AL: 1-855-876-4531
brident.com



FLY-SRP-SPA-BD

brident.
DENTAL & ORTHODONTICS

Instrucciones Del Kit Para El Cuidado De Enfermedades De Los Dientes y Encías



Rotadent ProCare® requiere una técnica de cepillado diente por diente. La rotación de 360 grados puede hacer que el cabezal del cepillo se resbale de los dientes durante su uso, especialmente cuando se está acostumbrando a usar esta técnica por primera vez. Para ayudar a corregir esto, tome el mango con firmeza para estabilizarlo. Luego, siga los bordes de las encías para garantizar la limpieza adecuada de todas las superficies, como se describe a continuación:

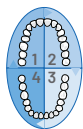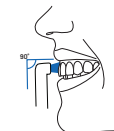

- **Técnica de cepillado:** Sostenga su Rotadent ProCare® de modo que la punta del cepillo entre en contacto con el borde de las encías y la superficie del diente en un ángulo de 90 grados. Para limpiar a fondo cada diente, realice movimientos en forma de "M" en los dientes superiores para masajear el borde de las encías, y movimientos en forma de "W" en los dientes inferiores.
- **Temporizador incorporado:** Para asegurarse de que se está cepillando de manera uniforme, divida la boca en cuatro secciones (o cuadrantes). Cepille cada cuadrante minuciosamente durante 30 segundos, según indique el QuadTimer.
- **Nota:** Algunas personas pueden experimentar una leve sensación de hormigueo cuando utilizan el Rotadent ProCare® por primera vez. Esto debe desaparecer después de unos días de uso.

[Referencia: Manual del usuario de Rotadent ProCare®]

Pro-DenRx® Chlorhexidine

Generalmente recomendado para usar durante dos semanas.

- Primero cepillate y usa hilo dental
- Mide media onza de líquido (15 mililitros) en la tapa que viene con la botella
- Mueve el líquido entre tus dientes vigorosamente por lo menos durante 30 segundos y después escúpelo
- No te lo tragues. No lo mezcles con agua ni otros líquidos. No comas ni bebas nada inmediatamente después de usar esta medicina

15 mililitros
marcados dentro de
la tapa de la botella



[Más detalles en denmat.com]

Pro-DenRx® Gel Neutral 1.1% Con Fluoruro De Sodio

- Aplícalo diariamente a la hora de dormir, en lugar de tu pasta de dientes regular y con más frecuencia si tu dentista recomienda terapia adicional basada en el diagnóstico
- Cubre la cabeza con el Pro-DenRx® gel neutral 1.1% con fluoruro de sodio y cepillate alrededor de todas las superficies de los dientes y la línea de la encía por lo menos durante dos minutos
- Escupe el gel
- **Adultos:** Esperar 30 minutos antes de enjuagarse la boca
- **Niños menores de 12:** Enjuagarse la boca a fondo inmediatamente después del uso

Cubre la cabeza del
cepillo con el gel



[Referencia: Manual de uso DenMat]

Instrucciones entregadas para la comodidad del paciente. Para más detalles favor consultar las instrucciones del fabricante incluidas en cada envase. Soumava Sen DDS, P.C. y Brident Dental Associates, P.C. son propiedad y están operados de forma independiente por los dentistas matriculados, Soumava Sen, DDS, Yein Kim, DMD y Sylvia Lin, DDS, quienes hacen negocios en nombre de Brident. Los consultorios de Brident reciben servicios de apoyo administrativo y empresarial de Brident Dental Services, LLC ("BDS"). BDS no es propietario de los consultorios dentales ni los opera, como tampoco emplea ni supervisa de ninguna manera a los dentistas que brindan atención dental.

FLY-SRP-SPA-BD

brident.
DENTAL & ORTHODONTICS